


For Blood Collection

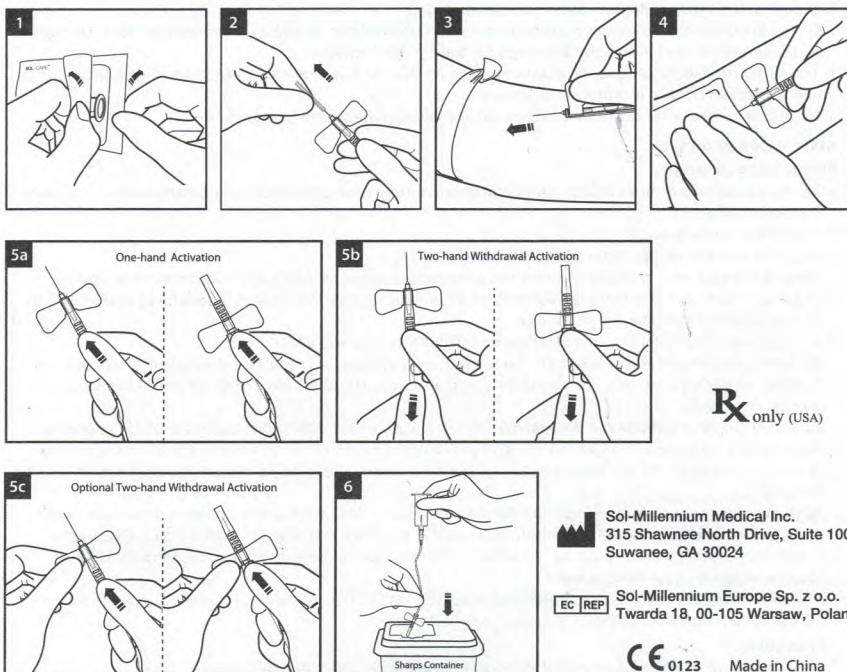

Rx only (USA)

Sol-Millennium Medical Inc.
315 Shawnee North Drive, Suite 100
Suwanee, GA 30024

EC REP Sol-Millennium Europe Sp. z o.o.
Twarda 18, 00-105 Warsaw, Poland

CE 0123 Made in China

Distributed by/Importer in EU:
Greiner Bio-One GmbH,
Bad Haller Str. 32,
4550 Kremsmünster, Austria

PL BEZPIECZNY zestaw igieł motylkowych VACUETTE® + uchwyt

Wskazania do stosowania

BEZPIECZNY zestaw igieł motylkowych VACUETTE® + uchwyt jest jednorazową, sterylną igłą motylkową, służącą do pobierania krwi lub do krótkotrwałej infuzji dożylną. Wyrób jest zaprojektowany z mechanizmem zabezpieczającym, który pomaga ograniczyć ryzyko zakłucia igłą.

Przeciwwskazania

Nie istnieją żadne przeciwwskazania do stosowania niniejszego wyrobu.

Ostrzeżenia

1. Nie stosować wyrobu po dacie przydatności.
2. Niewłaściwe obchodzenie się z wyrobem po użyciu może skutkować zakażeniem krwi lub zakłuciem, co z kolei prowadzi do potencjalnej choroby zakaźnej krwi.
3. Po użyciu, wyrób należy traktować jako odpad medyczny i usuwać do pojemnika na odpady ostre lub zgodnie z odpowiednimi procedurami obowiązującymi w danej jednostce.
4. Nie stosować wyrobu w środowisku rezonansu magnetycznego (RM).

Instrukcja obsługi

Dla pobierania krwi:

1. Rozzerwać opakowanie BEZPIECZNEGO zestawu igieł motylkowych VACUETTE® + uchwyt zgodnie z instrukcją, aby umożliwić prawidłowe wyjęcie wyrobu.
3. Usunąć osłonkę igły.
4. Nakłuć żyłę zgodnie z procedurą w danej jednostce.

Uwaga: NIE popychać osłonki ochronnej, ponieważ może to doprowadzić do aktywacji mechanizmu zabezpieczającego.

4. Po pobraniu wszystkich próbek, wyjąć igłę z żyły, trzymając skrzydełka kciukiem i palcem wskazującym.

5. Aktywacja osłonki igły BEZPIECZNEGO zestawu igieł motylkowych VACUETTE® + uchwyt:

5a. Aktywacja jednoręczna: Trzymając wężyk popchnąć osłonkę ochronną za pomocą kciuka i palca wskazującego do usłyszenia dźwięku sygnalizującego, że osłonka została zablokowana ponad ostrzem igły.

5b. Aktywacja oburęczna: Przytrzymać przezroczysty uchwyt osłonki ochronnej kciukiem i palcem wskazującym a drugą ręką odciągać wężyk do usłyszenia dźwięku, sygnalizującego, że igła została całkowicie wsunięta, a osłonka ochronna jest zablokowana w miejscu.

5c. Alternatywna aktywacja oburęczna: Chwycić skrzydełko między kciuk a palec wskazujący a kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki złapać przezroczysty uchwyt osłonki ochronnej. Popchnąć osłonkę do całkowitego zakrycia igły. Po zablokowaniu osłonki ochronnej usłyszymy wyraźne kliknięcie.

6. Wyrzucić użytą igłę BEZPIECZNEGO zestawu igieł motylkowych VACUETTE® + uchwyt razem do pojemnika na odpady ostre, zgodnie z procedurą w danej jednostce.

Uwaga:

1. Wyrób jest sterylny, chyba że opakowanie jest zniszczone lub otwarte.
2. Nie stosować wyrobu, jeżeli opakowanie jest otwarte lub zniszczone.
3. Jeżeli nie jest możliwe aktywowanie mechanizmu zabezpieczającego, należy wyrzucić wyrób do pojemnika na odpady ostre.
4. Rękawiczki i inne środki ochrony osobistej są niezbędne do ochrony przed patogenami krwiopochodnymi.
5. Wyrób jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie.